

Rigi-Box®

SaniSafe®

Gebrauchsanweisung



Spitze und scharfe Gegenstände oder kontaminierte Gebrauchsartikel können bei unsachgemäßer Handhabung Gefahr für Leib und Leben darstellen. Bitte beachten Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.

1. Montage

Eine Montage entfällt, da die Box funktionsfähig und bereits montiert ausgeliefert wird.

2. Öffnen und Schließen im täglichen Gebrauch

Die Box ist mit einem Drehdeckel (3) ausgestattet und dadurch mit einer Hand zu bedienen. Der Drehdeckel (3) wird durch Drehung mit der Hand in die OPEN- bzw. CLOSE-Position bewegt.

Die Box kann nun transportiert und jeder Zeit (wie oben beschrieben) wieder geöffnet werden.

3. Endverschluss des Klappdeckels (3, 4)

Nach Befüllung der Box (Vorsicht: Nicht über die Füll-Linie (5) befüllen) wie folgt verfahren:

Für den Endverschluss den Drehdeckel (3) in die CLOSE-Position drehen und Fläche mit der Beschriftung "PUSH" (4) fest in das Boxenunterteil (2) drücken. Die Verschlussklappe (4) rastet hörbar ein.

„Überfüllung - Maximale Füllhöhe

Die Maximale Füllhöhe (5) darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden (Vorsicht - Verletzungsgefahr!).

5. Haltevorrichtungen (entfällt)

Eine Haltevorrichtung oder Adaptierung ist für diese Box momentan nicht vorgesehen.

6. Abdreh-/Abziehvorrichtung

6.1 Halbrunde Aussparung (A)


Diese Kerbe (A) dient dem Abziehen von normalen Kanülen vom Spritzenkörper. Sollte das verwendete Blutentnahmesystem in diese Aussparung (A) passen, Kanüle gegen Uhrzeigerrichtung drehen, bis Kanüle abgedreht ist und in das Boxenunterteil fällt.

6.2 Stern für Insulin-Pens (B)

Der Stern (B) dient dem Abdrehen der Nadel vom Insulin-Pen. Den Insulin-Pen einfach in die Aussparung (B) drücken und gegen die Uhrzeigerrichtung drehen, bis die Kanüle in das Boxenunterteil fällt.

6.3 Abzugseinrichtung für Skalpelle (C)

Die Abzugsvorrichtung für Skalpelle trennt die Klinge vom Aufnahmeschaft, indem die Klinge beim einschieben leicht angehoben und verrastet wird. Beim wieder abheben, fällt die Klinge in die Box.

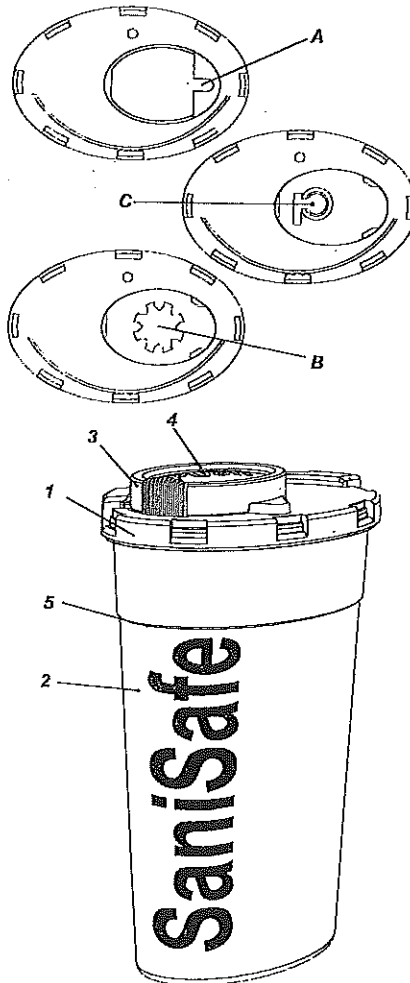

A. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Entsorgungsbehälter dient ausschließlich zur Entsorgung von Kanülen und Skalpell-Klingen aus dem medizinischen Bereich. Alle anderen Verwendungsarten sind nicht bestimmungsgemäß. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entfällt die Herstellerhaftung.

B. Allgemeine Beschreibung

Die benannte Entsorgungsbox besteht aus dem Material Polypropylen. Bei der Verbrennung entstehen keine schädlichen Emissionen.

C. Entsorgung und Kennzeichnung:


Die zu entsorgenden Produkte (siehe bestimmungsgemäße Verwendung) müssen vor dem Befüllen der Box auf spezifizierte oder unspezifizierte Schadstoffe geprüft und die Box durch einen Verantwortlichen nach Gefährdungsgrad gekennzeichnet werden.

Beachten Sie zur Entsorgung der Box die gesetzlichen Richtlinien, bzw. Vorschriften der einzelnen Bundesländer.



7. Sicherheitshinweise

- Nicht mit der Hand oder in sonstiger Weise in die Box fassen (Verletzungsgefahr!).
- Keine Gegenstände gewaltsam in die Box drücken.
- Befüllte Box nicht von außen in irgendeiner Weise zusammendrücken.
- Vor der Entsorgung der Box genau prüfen, ob der Endverschluss (4) "PUSH" eingedrückt ist.
- Skalpelle (Klingen) müssen mit besonderer Sorgfalt in die Box entsorgt werden. Durch zu hohe Krafteinwirkung beim Einwerfen oder beim Nachfüllen anderer Gegenstände besteht die Gefahr einer Verankerung und Beschädigung der Boxenwandungen oder des Bodens.
- Keine Flüssigkeiten in die Box einfüllen.
- Gebrauchsanweisung und Box-Aufschriften beachten (falls vorhanden).
- Box nicht herunterwerfen. Box nicht schütteln. Box nicht fallenlassen.
- Vor Verschluss der Box prüfen, ob Gegenstände aus der Öffnung ragen, sonst entfernen.
- Box nur mit den Händen und nicht gewaltsam schließen.
- Den Druckknopf (4) nicht zum Eindrücken der zu entsorgenden Gegenstände verwenden.
- Keine kompletten Spritzen oder Skalpelle in die Box stecken.
- Gefahrgut niemals schräg, sondern nur senkrecht in die Box abwerfen.
- Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen.
- Spitze und scharfe Gegenstände gehören nicht in Plastiksäcke oder andere ungeeignete Behälter.

Tagesverschluss:

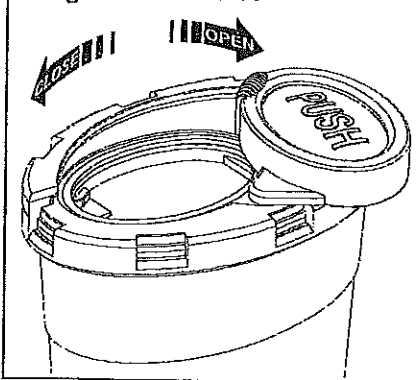

Endverschluss:

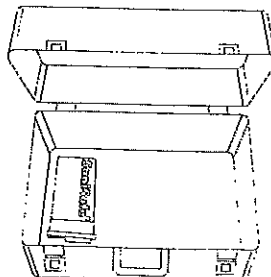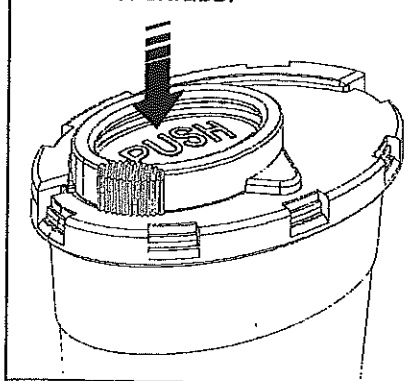

Hinweis: Gegenüber Darstellungen und Angaben in dieser Gebrauchsanweisung sind technische Änderungen, die zur Verbesserung des Produktes notwendig sind, vorbehalten.

TIPP:

Die Box so in den Koffer legen, dass der Kopf der Box Richtung Koffergriff zeigt. Wird der Koffer am Griff getragen, dann steht die Box mit der Öffnung nach oben in Ihrem Rettungskoffer.